




Somente a **Terapia 3M™
V.A.C.®**, desempenha
como Terapia V.A.C.®

Porque utilizar a Terapia 3M™ V.A.C.®?

O Sistema de Terapia V.A.C.® tem um mecanismo de ação exclusivo que induz uma resposta física (macro-tensão) e uma resposta biológica (micro-tensão) **que favorece a cicatrização de feridas.**

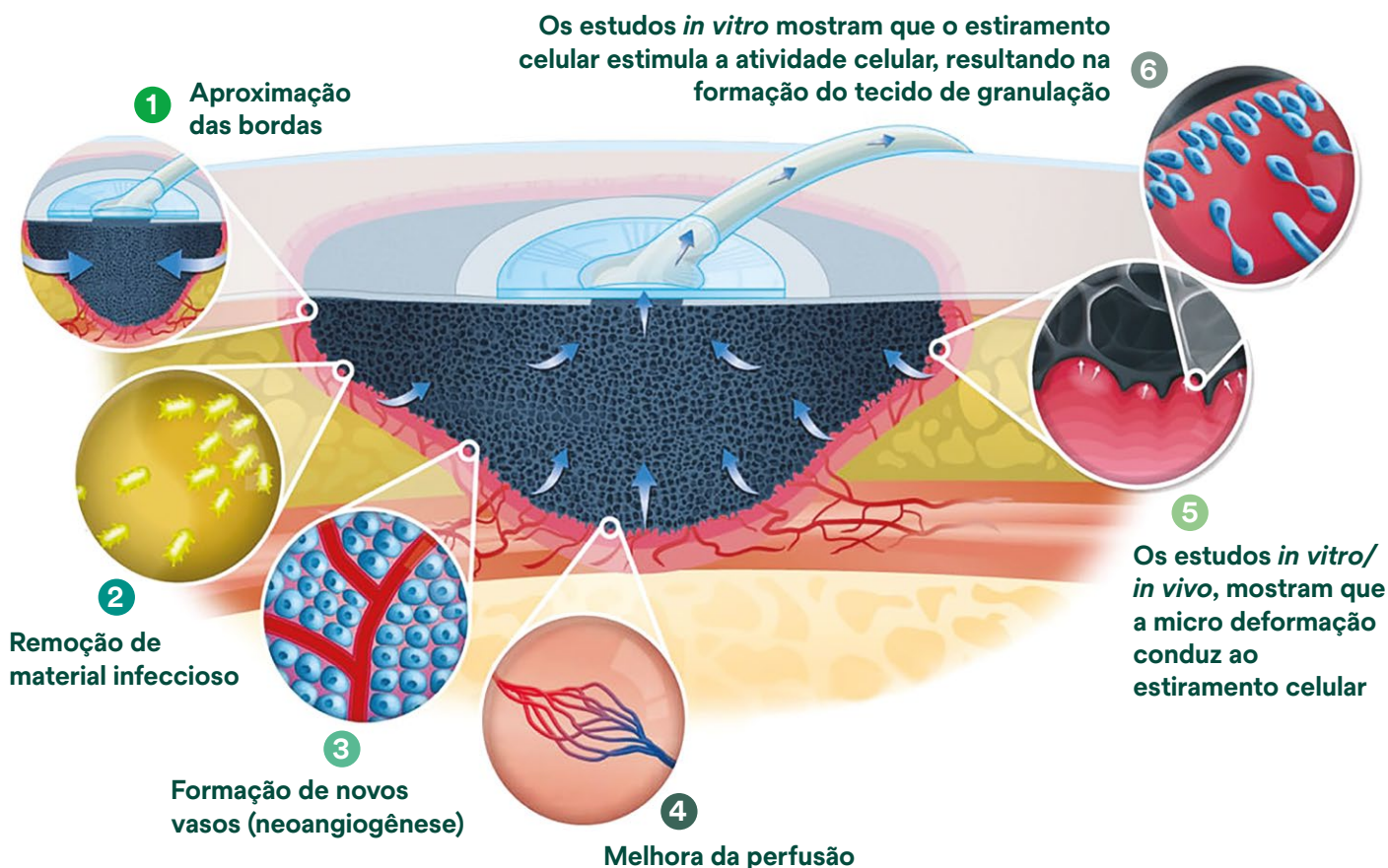

Dois tipos de Terapia por Pressão Negativa para Feridas

Terapia 3M™ V.A.C.®

Tratamento de feridas abertas: visa criar um ambiente que promove a cicatrização de feridas secundárias ou terciárias (primárias retardadas), preparando o leito da ferida para o fechamento, reduzindo o edema, promovendo a formação de tecido de granulação, a perfusão e removendo o exsudato e o material infeccioso.

Terapia 3M™ Veraflo™

Segue os princípios da Terapia V.A.C.®, mas com instilação e imersão: drenagem assistida a vácuo e fornecimento controlado de soluções tópicas para tratamento de feridas com uma função de imersão programável que permite que a solução permaneça na ferida para um contato completo, o que acelera a formação de tecido de granulação.

Terapia		Terapia 3M™ V.A.C.® Terapia de pressão negativa convencional					Terapia 3M™ Veraflo™ Terapia de pressão negativa com instilação		
Benefícios econômicos		Uma análise de dados obtidos a partir dos registros de 21.638 pacientes hospitalizados, pelos serviços de Premier Research, comparou a Terapia 3M™ V.A.C.® com outros produtos de TPN e demonstrou: ¹					Uma revisão sistemática dos estudos comparados a uma meta análise de 13 estudos e 720 pacientes com vários tipos de feridas, demonstrou que a Terapia 3M™ Veraflo™ proporcionou vantagens significativas em relação ao controle, o que incluiu a Terapia 3M™ V.A.C.® ^{3,4}		
		 10% Menor tempo de hospitalização.*  US\$ 14.500 Diminuição dos custos hospitalares por paciente.  11% Redução nos custos hospitalares.**					 >30% Menos desbridamentos cirúrgicos.^{3,4} (1,77 desbridamentos vs 2,69 p = 0,008)^{3,4}  >50% No tempo de terapia.^{3,4} (7,88 dias vs. 14,36 dias, p = 0,003)^{3,4}  >50% Maior probabilidade de redução de contagem bacteriana.³ (p=0,003)⁴		
Referências:		1. Law A, Beach K. Hospital Stay Costs Associated With Negative Pressure Wound Therapy. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care. 2014 Oct 16-18, Las Vegas, Nevada. 2. *Cálculo del % de reducción basado en 13,0 días (terapia V.A.C.®) frente a 14,5 días (otras NPWT) (p <0,001). **Cálculo del % de reducción basado en US\$ 112 759 (terapia V.A.C.®) frente a US\$ 127 272 (otra NPWT). (p = 0,001).					3. Gabriel, Allen MD, FACS; Camardo, Mark MS; ORourke, Erin BS; Gold, Rebecca BS; Kim, Paul J. DPM, MS, FACFAS Effects of Negative-Pressure Wound Therapy With Instillation versus Standard of Care in MultipleWound Types: Systematic Literature Review and Meta-Analysis, Plastic and Reconstructive Surgery. January 2021 - Volume 147 - Issue 1S-1 - p 68S-76S doi: 10.1097/PRS.00000000000007614.18. 4. Camardo, Mark. Veraflo Meta-Analysis Standardized and Non-Standardized Means, 3M Internal Report, San Antonio, Texas, 2020.		
Curativo		3M™ V.A.C.® Granufoam™	3M™ V.A.C.® Granufoam Silver™	3M™ V.A.C.® Simplace™ Ex	3M™ V.A.C.® Granufoam™ Bridge	3M™ V.A.C.® Whitefoam™	3M™ Veraflo™	3M™ Veraflo Cleanse Choice™	3M™ Veraflo Cleanse™
									
Tipos específicos de feridas	Indicação de Uso	Feridas agudas e/ou de difícil cicatrização (crônicas); Feridas traumáticas; Queimaduras de espessura parcial; Lesão por pressão estágios 3 e 4; Úlceras nos pés pessoas com diabetes; Úlceras Venosas.							
	Retalhos e Enxertos	X		X		X			
	Tunelizadas/cavitárias					X			X
	Feridas com contaminação e/ou biocarga aumentada		X				X*	X*	

*Junto com o cuidado adequado da ferida, como o desbridamento e os antibióticos sistêmicos, a Terapia Veraflo pode ser utilizada como uma terapia complementar em feridas com contaminação e biocarga aumentada.

Ciência, tecnologia e soluções baseadas em evidências.

A combinação exclusiva para ajudar a promover a cicatrização em uma ampla variedade de feridas agudas e crônicas.¹

Dados e evidências de alta relevância

87,4%

da evidência clínica publicada sobre terapias de pressão negativa baseia-se nas soluções de TPN da Solventum/3M.²

+2.000

publicações revisadas por pares e **95 ensaios randomizados** para respaldar a terapia 3M™ V.A.C.®.

Benefícios clínicos comprovados

+25 anos

de resultados comprovados.

+10 milhões

de feridas tratadas em todo o mundo.³

Tecnologias inovadoras

Tecnologia 3M™ SensaT.R.A.C.™

A tecnologia 3M™ SensaT.R.A.C.™ é uma tecnologia patenteada que mantém e ajusta a pressão definida no leito da ferida, garantindo a manutenção de um ambiente adequado para o tratamento da ferida.



Tubo com a tecnologia 3M™ Easyclear Purge™

Permite que o ar passe periodicamente pelo lúmen externo, ajudando a limpar e evitando obstruções que podem interromper a Terapia.



Medicina eficiente

Menor custo total⁵

Com base em uma análise retrospectiva do banco de dados de solicitações de reembolso de seguro nacional, comparando o custo total do tratamento com a terapia 3M™ V.A.C.® e a TPN da concorrência; em 30 dias, US\$ 17.809 e US\$ 24.405, respectivamente ($p < 0,0001$).



Redução do tempo de fechamento da ferida.^{6,7}

Com base em uma revisão sistemática da literatura de treze estudos (720 pacientes) para determinar os efeitos da NPWTi-d (Terapia 3M™ Veraflo) versus terapia de controle; as feridas no grupo NPWTi-d estavam prontas para fechamento mais rapidamente do que as feridas de controle ($p = 0,03$).




Referências:

1. Willy C, Voelker HU, Englehardt M. Literature on the subject of vacuum therapy review and update. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2007;33:33-39.
2. Data on file, 3M. 2021. Cumulative NPWT Wounds.
3. KCI. Cumulative NPWT Wounds — 10 million. 2013-2015. Internal Report (v1.0). 2018.
4. Page JC, Newswander B, Schwenke DC, Hansen M, Ferguson J. Retrospective analysis of negative pressure wound therapy in open foot wounds with significant soft tissue defects. *Adv Skin Wound Care.* 2004; 17:354-364.
5. Law AL, Krebs B, Karnik B, Griffin L. Comparison of healthcare costs associated with patients receiving traditional negative pressure wound therapies in the post-acute setting. *Cureus.* 2020;12(11): e11790.
6. Gabriel A, Camardo M, O'Rourke E, Gold R, Kim PJ. Effects of negative-pressure wound therapy with instillation versus standard of care in multiple wound types: systematic literature review and meta-analysis. *Plast Reconstr Surg.* 2021;147(1S-1):68S-76S.
7. Camardo, M. Veraflo meta-analysis standardized and non-standardized means. 3M Internal Report; San Antonio, Texas; 2020.

Sistema de Terapia por Pressão Negativa integrado e abrangente.

O Sistema de Terapia 3M™ V.A.C.® Ultra é uma unidade integrada de tratamento de feridas que oferece quatro terapias distintas em um único dispositivo.

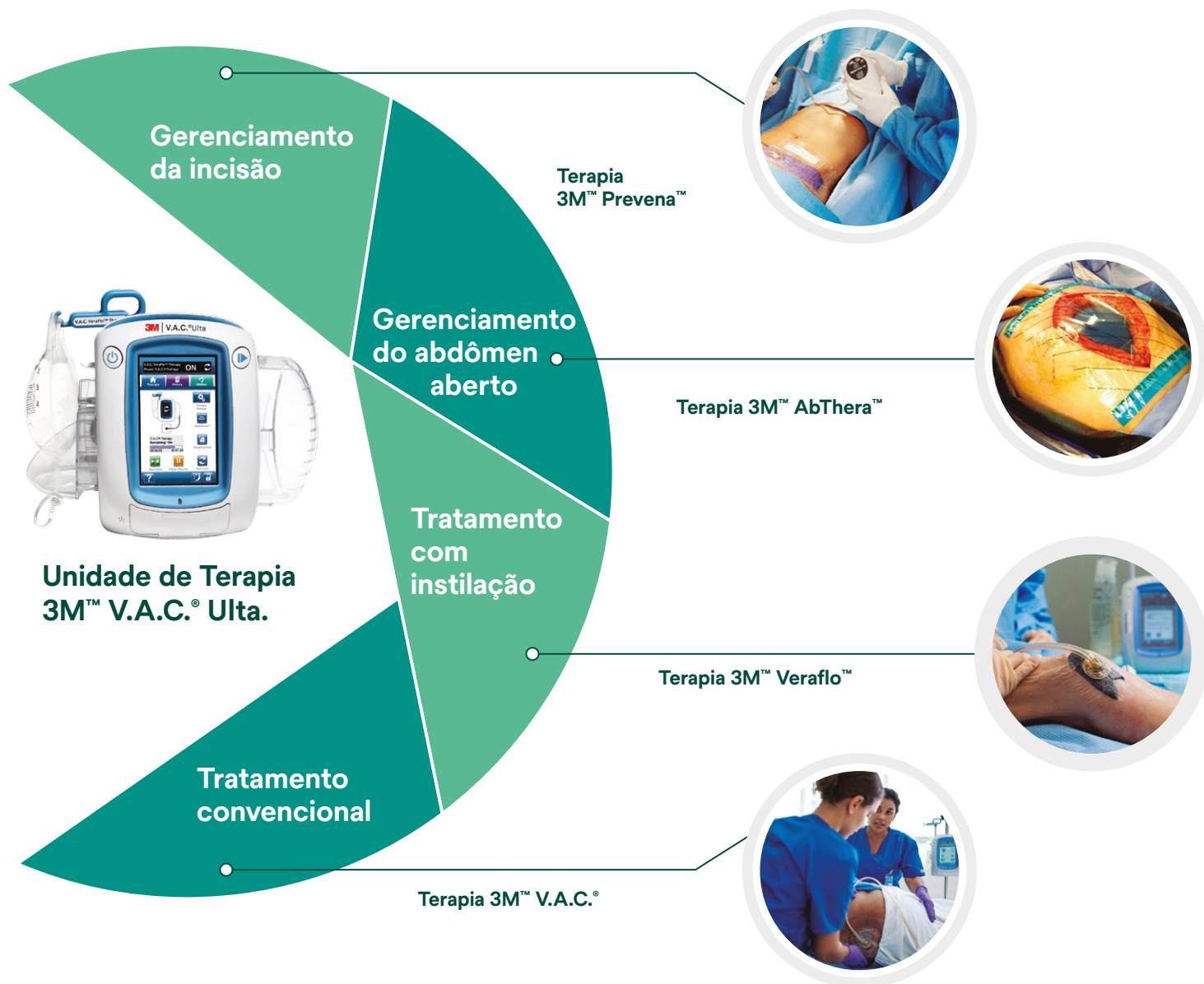

Para conhecer mais benefícios da Terapia por Pressão Negativa, contate o seu representante local Solventum.



Divisão de Soluções Médicas
Sumaré - SP, Brasil.
Rod. Anhanguera, Km 110
Fale com a 3M: 0800 0132333
www.3m.com.br/3M/pt_BR/hospitalar

* Observações:

Existem indicações, contraindicações, advertências, precauções e informações de segurança específicas para estes produtos e terapias. Consulte o médico e as instruções de uso antes de sua aplicação. Este material está destinado aos profissionais de saúde. Somente com receita.

© Solventum 2024. Solventum, o logotipo S e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logotipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M. Outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.